

Occluform-3: Installation und Anwendung



Lieferform: Occluform-3, komplett, Best.-Nr.: 188 580



Hydrauliköl,
siehe Hinweise
zum Nachfüllen
der Hydraulik

- | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| A, Anpressknopf | E, Stützstiftfixierung | I, Befestigungsring |
| B, Arretiergelenk | F, Modellplatte | J, mit Fixierschraube |
| C, Okkludierbügel | G, Gelenkschraube | K, Granulatschaufel |
| D, Stützstift | H, Gelenksäule | L, Modelltopf |
| | | M, Inbusschlüssel Gr. 3 |

Um eine
Zerstörung der
Gelenkflächen zu
vermeiden, dürfen
diese nicht
geschmiert
werden!

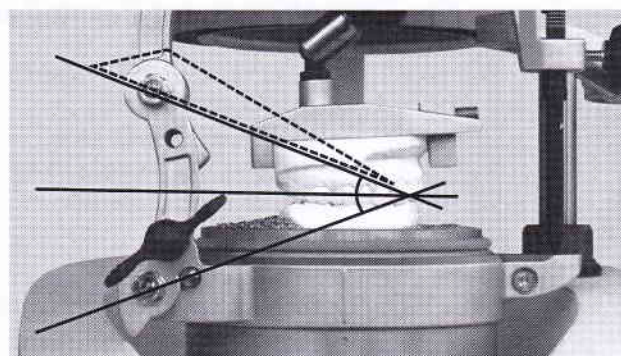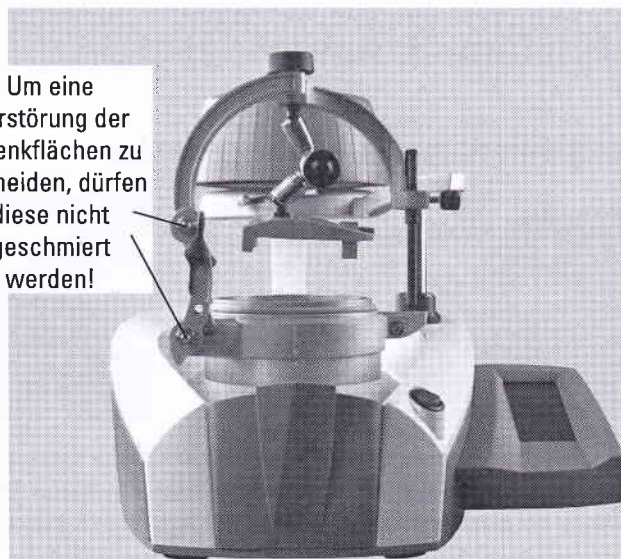


Die Konstruktion des Occluform-3 Geräts basiert auf einem Bonwilldreieck mit der Schenkellänge von 11,5 cm (gestricheltes Dreieck) und einem Balkwillwinkel von 20°.


Einbauanleitung



1. Den Occluform-3 mit dem Befestigungsring auf das 3d-Gehäuse quer zum Gerät aufsetzen (Stützstift rechts).

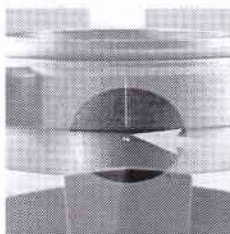


2. Markierungslinie des Befestigungs-rings auf den Punkt am Formtopf ausrichten.

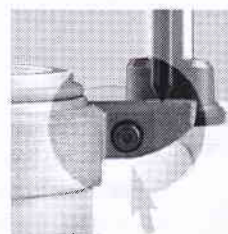


3. Den Befestigungsring nach unten drücken und die Fixierschraube mit dem Inbusschlüssel (M) festziehen.


Hinweise zum Nachfüllen der Hydraulik

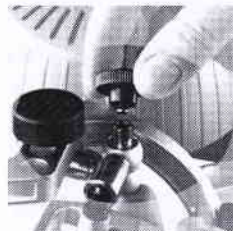

1. Wenn die Schließkraft des Arretiergelenks schwächer wird, Öl nachfüllen, dazu die schwarze Mutter komplett lösen und herausziehen.

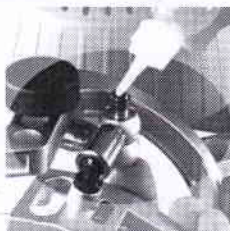


2. Öl (Maschinenöl) einfüllen, bis die Röhre fast voll ist.

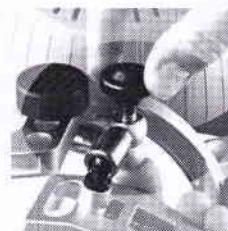


3. Wieder verschließen und die Schließkraft überprüfen. Falls das Gelenk offensichtlich undicht ist, muss es repariert werden.

Fixierung von mittleren und großen Modellen

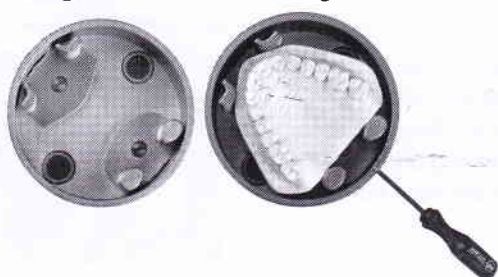

Fixierung von kleinen Modellen

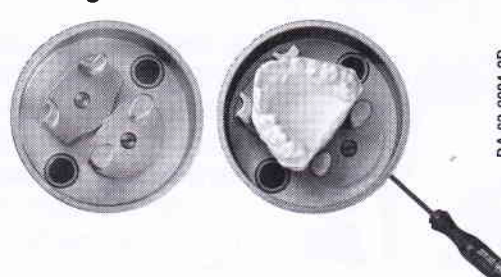

BA 63-9004-2D